


Manual de Instruções

Maxilife

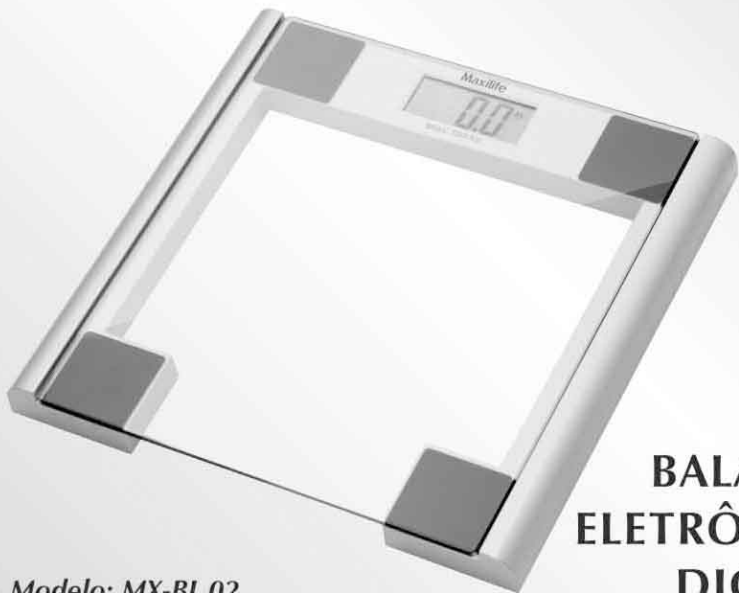

**BALANÇA
ELETRÔNICA
DIGITAL**


Modelo: MX-BL 02

A **MAXILIFE** agradece a sua compra de uma **Balança Eletrônica Digital**.

Com cuidados normais e tratamento apropriado, a balança prestará um serviço confiável por vários anos.

Leia atentamente o Manual de Intruções para se informar sobre a utilização apropriada e as características especiais de sua balança. Guarde este manual para futuras consultas.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES

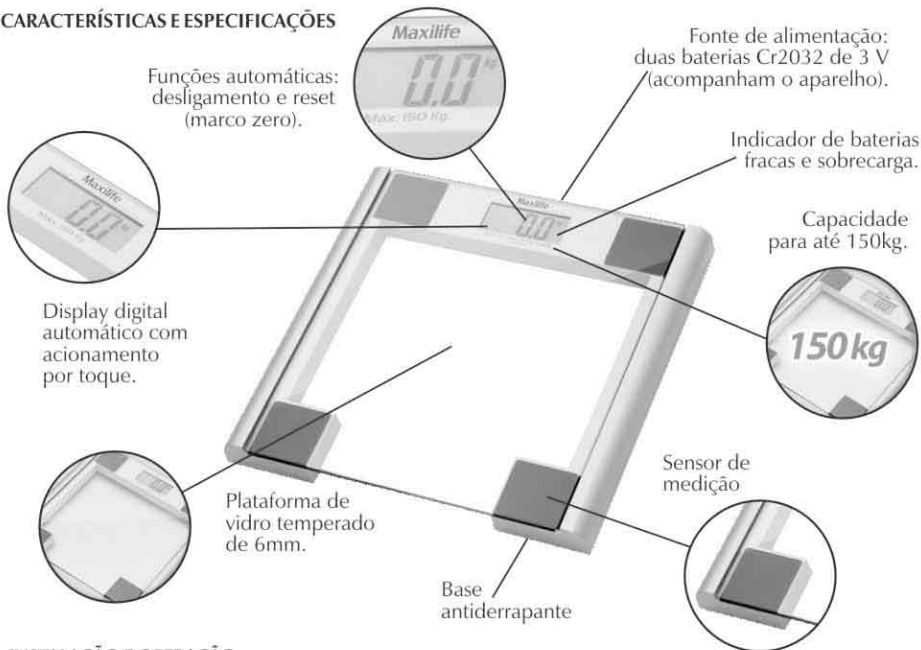

INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

- Retire a tampa do compartimento da bateria e retire o isolante puxando-o delicadamente.
- Selecione a unidade de peso de sua preferência: st/kg/lb
- Feche e trave novamente o compartimento da bateria.
- Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e rígida.

- Ligue seu aparelho tocando levemente a plataforma com o pé. Aguarde alguns segundos até aparecer 0.0.
- Cuidadosamente, suba na plataforma colocando os dois pés completamente sobre ela.
- Sem mover-se aguarde enquanto seu peso é calculado.

Nota:

Caso você pise sobre a plataforma antes do display digital totalmente zerado, o mostrador apresentará ERR. Caso isso aconteça, inicie o processo novamente.

- O aparelho desliga-se automaticamente cerca de 6 segundos após a última pesagem.
- Se a balança receber uma sobrecarga (mais de 150 kg) o display apresentará a informação de erro: ERR.

MANUTENÇÃO

- Para limpeza externa passe um pano seco ou levemente úmido e macio para não riscar a superfície da plataforma de vidro.
- Não permita que a água penetre no interior do mecanismo eletrônico.
- Não utilize agentes limpadores químicos.
- Nunca mergulhe o aparelho na água.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Antes de utilizar o aparelho leia atentamente todas as instruções de uso, elas são necessárias para um perfeito funcionamento de seu produto, e de sua segurança:

- Colocar a sua balança sobre uma superfície plana e dura garantirá maior precisão das medidas.
- Pese-se sempre na mesma balança colocada no mesmo local.
- Pisos irregulares podem afetar as leituras.
- Para sua segurança não pise na plataforma com os pés molhados para não escorregar.
- Pese-se sempre sem roupas ou sapatos, antes das refeições e sempre no mesmo horário, de preferência ao levantar-se.
- Este aparelho faz um arredondamento de 50 a 100 g para mais ou para menos. Se você fizer duas pesagens com valores diferentes, seu peso deve ficar dentro desta tolerância.
- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará na perda da garantia.
- Para evitar acidentes não permita que crianças utilizem o produto ou mesmo pessoas que desconheçam suas instruções de uso.
- Não guarde sua balança em posição vertical quando ela não estiver em uso para não esgotar as baterias.
- Remova as baterias da balança se esta não for ser utilizada por um longo período.
- Se o produto apresentar mau funcionamento, entre em contato com o **Serviço de Atendimento ao Consumidor MAXILIFE**.
- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e / ou trocas de peças em casa, caso necessário, ligue para o **Serviço de Atendimento ao Consumidor MAXILIFE** para receber as orientações necessárias.